



DEPELER

Signature of excellence

CURETTES SMART SCALING

Deux instruments pour un traitement parfait
de toutes les poches parodontales



DEUX CURETTES UNIVERSELLES

pour un traitement parfait de toutes les surfaces

- Traitement complet avec un set minimaliste
- Plus de confort pour le praticien et le patient
- Une logistique simplifiée dans le cabinet
- Instruments légers et ergonomiques




DESIGN INNOVANT

pour un accès optimal aux poches parodontales

La forme des curettes Smart Scaling est le résultat d'une recherche approfondie.

Le diamètre de la tige, la longueur des différents segments et les angles ont été soigneusement étudiés pour assurer un accès facile aux poches. La lame à double tranchant a un grand angle et une forme conique arrondie. Cette géométrie unique permet de travailler en toute sécurité, sans endommager les tissus sains.

Angle plus ouvert = sécurité de traitement

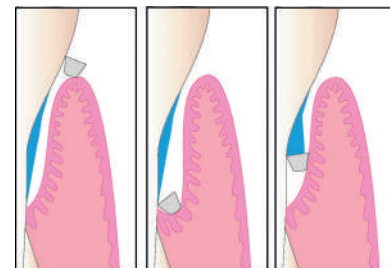

« Les instruments à main modernes doivent permettre un traitement micro-invasif. Ils doivent donc être précis et fins, sans pour autant perdre de leur stabilité. Outre les propriétés ergonomiques, ils doivent permettre un traitement clinique efficace. En collaboration avec Deppeler, nous avons atteint ces exigences lors du développement des nouvelles curettes DSS. Le double tranchant et l'angulation spéciale de la pointe permettent d'atteindre toutes les surfaces des dents avec seulement deux instruments. Le marquage de type "sonde parodontale" sur les pointes des instruments permet un curetage précis, sans abimer les tissus sains. Le nouveau manche est conçu pour éviter les crampes et fatigue durant le travail. Essayez les curettes DSS, vous serez ravis ! »

Daniela Krejci, Hygiéniste dentaire ES, Groupement dentaire de Signy (Suisse)

Curette universelle 'Smart Scaling' - Incisives/Canines & Buccal/Palatal | DS1CN

Incisives/Canines

Buccal / Palatal



DS1CN sur une canine.

Curette universelle 'Smart Scaling' - Mesial/Distal | DS2CN

Mesial / Distal

Mesial / Distal



DS1CN sur la surface buccale d'une dent antérieure.

Crédits photos : Sonja Steinert, Hygiéniste dentaire (DE)

« Nous avons trouvé les curettes Smart Scaling très ergonomiques et faciles à utiliser. Leur forme permet de changer de surface à traiter sans changer d'instrument, ce qui réduit le nombre d'instruments nécessaires. Le tranchant, la dureté et la flexibilité des pointes sont incroyables et offrent la sensation d'un instrument neuf à chaque traitement ! »

Équipe RDH, Fergus & Glover, Aberdeen (Royaume-Uni)

Également disponible avec un marquage 3-6-9-12 sur la tige

Le marquage sur la tige des curettes Smart Scaling permet de s'assurer que l'on travaille à la bonne profondeur. Le praticien travaille en toute sécurité, avec une précision inégalée.



Curette 'Smart Scaling' - Incisives/Canines & Buccal/Palatal avec marquage | DSS1CN

Curette 'Smart Scaling' - Mesial/Distal avec marquage | DSS2CN

Vidéo



Informations de commande

Ces instruments peuvent être commandés individuellement ou dans un kit.

Références des kits : KITDSCN

KITDSSCN (avec marquages)

inclus

- ☞ Curette universelle Antérieurs & Buccal/Palatal | réf. DS(S)1CN
- ☞ Curette universelle Mesial/Distal | réf. DS(S)2CN
- ☞ Détartreur universel | réf. M23CN
- ☞ Sonde double | réf. H125
- ☞ Miroir | réf. MIR-SDMS-N
- ☞ Casette de stérilisation | réf. CLEANextB5

Choix du manche

Manche CLEANext (gris foncé)



réf. DS(S)1 CN / DS(S)2 CN

Manchons ADEP (11 couleurs au choix)



réf. DS(S)1+ADEP (code couleur) / DS(S)2+ADEP (code couleur)



WWW.DEPELER.CH

f DEPELERSA | @ DEPELER_INSTRUMENTS



DEPELER

Signature of excellence